

**DISPENSADOR/REPIPETADOR MANUAL, 0,05 A 50 mL USO COM SERINGAS (COMBITIPS) INTERCAMBIÁVEIS
MODELO: STEPMATE**

DESCRIÇÃO:

O dispensador/repipetador Stepmate é um equipamento projetado com base princípio do deslocamento positivo para distribuição de líquidos em passos de modo fácil e confiável. Para dispensação de líquidos com alta viscosidade, alta densidade e alta pressão de vapor poderá auxiliar nas mais diversas rotinas laboratoriais em análises clínicas, biologia molecular, análise ambiental, com ampla faixa para dispensação de varia de 0,05 a 50 ml, e deve sem utilizada em conjunto com as seringas (combitips).

CARACTERÍSTICAS:

- Leve e ergonômica para facilitar sua utilização;
- Operação com apenas uma das mãos;
- Faixa de seleção de volume que varia de 1µL a 5mL;
- Até 48 passos para dispensação;
- Livre de manutenção ou calibração rotineira;
- Equipado com alavanca de inserção de seringas descartáveis;
- Adapta-se a sete tamanhos de seringas descartáveis de polipropileno de 0,5mL a 50 ML.



Fabricada para permitir dispensação suave

Botão seletor para até 5 volumes pré-configurados;

Haste deslizante para preencher o volume da seringa de modo fácil

Alavanca de inserção que segura firmemente a seringa.

Recursos do dispensador

Selecionando O VOLUME CORRETO PARA DISPENSAÇÃO:

- Encontre na tabela o volume de dispensação desejado;
- Utilize o seletor de ajuste para regular o volume;
- Selecione e insira seringas adequadas ao volume;
- Siga as etapas de distribuição máxima.

Tip volume		Dispensing Volume				
Tips	Sel	1	2	3	4	5
0.05ml	1µl	2µl	3µl	4µl	5µl	
0.50ml	10µl	20µl	30µl	40µl	50µl	
1.25ml	25µl	50µl	75µl	100µl	125µl	
2.50ml	50µl	100µl	150µl	200µl	250µl	
5.00ml	100µl	200µl	300µl	400µl	500µl	
12.50ml	250µl	500µl	750µl	1000µl	1250µl	
25.00ml	500µl	1000µl	1500µl	2000µl	2500µl	
50.00ml	1000µl	2000µl	3000µl	4000µl	5000µl	
Steps		48	23	15	11	8




Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

DISPENSADOR/REPIPETADOR MANUAL, 0,05 A 50 mL USO COM SERINGAS (COMBITIPS) INTERCAMBIÁVEIS
MODELO: STEPMATE

CB0213

ESPECIFICAÇÕES DO VOLUME PARA SERINGAS:

As seringas são particularmente adequadas para a distribuição de fluidos com alta viscosidade, alta pressão de vapor, etc. Elas são fabricadas com materiais de alta qualidade (Cilindro: Polipropileno-PP, Pistão: Poliestireno de alta densidade PE-HD) sem lubrificantes ou outros aditivos. Para melhor dispensação sempre descarte o primeiro e o ultimo liquido da seringa.

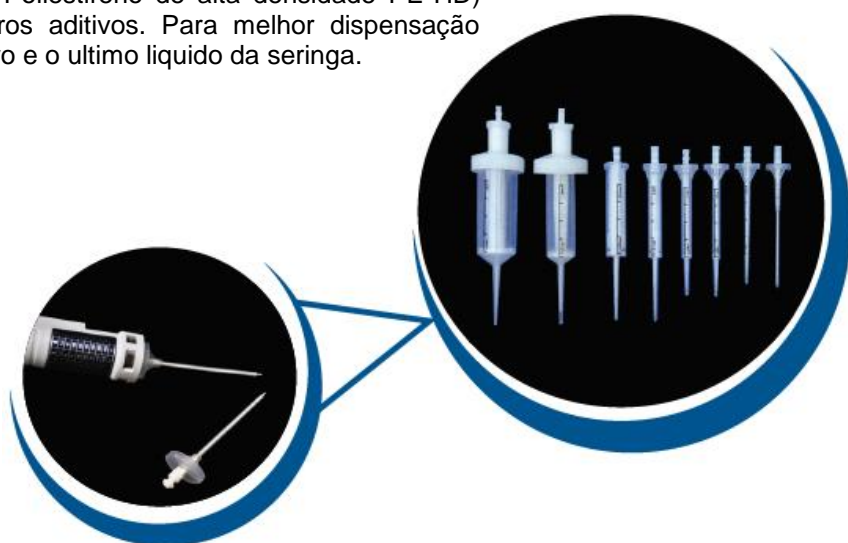

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

SELETOR		1	2	3	4	5			
Numero de passos		48	23	15	11	8			
N°Cat.	Volume da seringa (mL)	Volume de amostra(µL)					A %	P %	Descrição da seringa
17900032	0.50	10	20	30	40	50	± 0.8	≤ 0.7	0,5 ml, pistão em PE-HD, cilindro em PP, 1 pacote com 5 pcs.
17900033	1.25	25	50	75	100	125	± 0.8	≤ 0.5	1,25 ml, pistão em PE-HD, cilindro em PP, 1 pacote com 5 pcs.
17900034	2.50	50	100	150	200	250	± 0.8	≤ 0.4	2,5 ml, pistão em PE-HD, cilindro em PP, 1 pacote com 5 pcs.
17900035	5.00	100	200	300	400	500	± 0.4	≤ 0.3	5 ml, pistão em PE-HD, cilindro em PP, 1 pacote com 5 pcs.
17900036	12.50	250	500	750	1000	1250	± 0.3	≤ 0.3	12,5 ml, pistão em PE-HD, cilindro em PP, 1 pacote com 5 pcs.
17900037	25.00	500	1000	1500	2000	2500	± 0.2	≤ 0.3	25 ml, pistão em PE-HD, cilindro em PP, 1 pacote com 2 pcs e 1 adaptador.
17900038	50.00	1000	2000	3000	4000	5000	± 0.2	≤ 0.2	50 ml, pistão em PE-HD, cilindro em PP, 1 pacote com 2 pcs e 1 adaptador.